
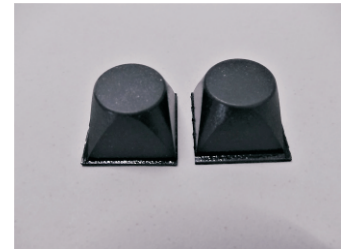


## Schubladeneinsatz für Schublade METAPACE K-1 (für Variante Schloß rechts)

### Mit INKiESS Schubladeneinsatz 714 RE

Dem INKiESS Schubladeneinsatz 714 RE sind 2 Bumpons als Abstandhalter beigelegt.

Originaleinsatz aus der Lade entnehmen und beide Schaumgummipolster aus der Lade entfernen.

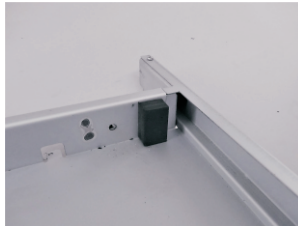

Die beiden beigelegten Abstandhalter an der Innenseite der Ladenblende links und rechts befestigen.



Abhängig von der Bauform des Schließhebels kann ein Schubladeneinsatz 714 RE in die Lade eingesetzt werden.

### Schließhebel für Einsatz 714 RE



**Wichtig:**  
Bitte das zusätzliche Datenblatt  
„Schloßvarianten Metapace K-1 (Schloß rechts)“  
beachten!



INKiESS Schubladeneinsatz 714 RE wie im Bild dargestellt einsetzen.  
Funktionskontrolle des Schlosses.